

SmartLite Pro EndoActivator™

PŘEHODNOŤTE SVOU PŘEDSTAVU O ČISTOTĚ





PART OF A



Získejte viditelnou čistotu.

Otevřenější dentinové tubuly

Pasivní vypláchnutí nestačí. Aktivace irigantů může pomoci vytvořit povrch s otevřenějšími dentinovými tubuly, umožňujícími lepší zaplnění postranních a přídatných kanálků.¹

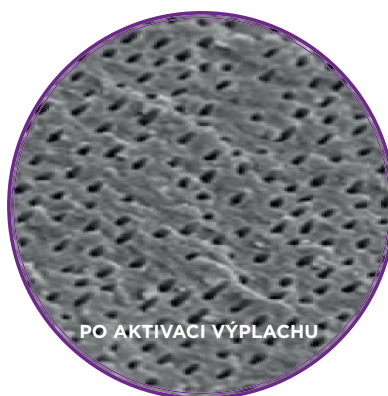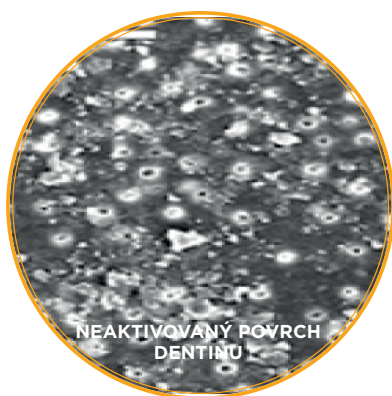

Věděli jste?

Po opracování zůstane i více než 35 % povrchů kanálků nedotčených.² Avšak dlouhodobý úspěch vašeho endodontického ošetření závisí na čistém kanálku.



Větší důvěra
v endo ošetření
v jedné návštěvě

Naše tři řešení pro endo ošetření jsou ušita na míru vašim potřebám a nabízejí pokročilou, komplexní endodontickou péči pro vaše pacienty.



1. Kanter V, Weldon E, Nair U, et al. A quantitative and qualitative analysis of ultrasonic versus sonic endodontic systems on canal cleanliness and obturation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011;112(6):809-813. doi:10.1016/j.tripleo.2011.06.002

2. Peters, O. A., K. Schonenberger, and A. Laib. "Effects of Four Ni-Ti Preparation Techniques on Root Canal Geometry Assessed by Micro Computed Tomography." International Endodontic Journal Int Endod J 34.3 (2001): 221-30

3. Interní data k nástroji. Pro více informací kontaktujte Consumables-Data-Requests@dentsplysirona.com.

Věděli jste?

Protokoly o dezinfekci se velmi liší,^{3,4} jsou však zásadní pro výsledek ošetření!⁴

?

Účinnější výplach za pouhých 90 sekund³

Změňte své endodontické ošetření. Přejděte na nový způsob práce s kořenovým kanálkem. SmartLite Pro EndoActivator™ je navržen pro pohyb ve více směrech a používá eliptický pohyb a větší energii pro efektivní aktivaci výplachu. Dodržování protokolu zajistí **více než 150krát vyšší redukci bakterií** oproti 1 minutě výplachu chlornanem bez aktivace.³

Pasivní vypláchnutí nestačí

Výplach chlornanem může trvat až 40 minut, aby účinně odstranil bakterie.⁵ Mnoho lékařů vyplachuje méně než 2,5 minuty, čímž jsou v kanálku ponechávány bakterie ohrožující výsledek ošetření.³

Opracování

Vytvořte ideální tvar pro vaše workflow s naší kompletní řadou nástrojů. Vyberte řešení, které odpovídá vašim preferencím: ProTaper Ultimate™, WaveOne® Gold nebo TruNatomy®.



Výplach

Aktivní výplach pomáhá 3D čištění a celkovému endodontickému ošetření.



Plnění

Využijte přednosti bezkonkurenčního tvaru injekčně vyrobených gutaperčových čepů Conform Fit®, které odpovídají unikátním tvarům vytvořeným vašimi endodontickými nástroji.

4. de Gregorio C, Arias A, Navarrete N, Cisneros R, Cohenca N. Differences in disinfection protocols for root canal treatments between general dentists and endodontists: A Web-based survey. J AM Dent Assoc. 2015 Jul;146(7):536-43. doi:10.1016/j.adaj.2015.01.027. PMID: 26113101.

5. Retamozo B, Shabahang S, Johnson N, Aprecio RM, Torabinejad M. Minimum contact time and concentration of sodium hypochlorite required to eliminate Enterococcus faecalis. J Endod. 2010 Mar;36(3):520-3. doi: 10.1016/j.joen.2009.12.005. PMID: 20171375.

Rozhýbejte čistší kanálky.

Technické specifikace

- Větší bezpečnost při každé proceduře – ohebné, nepreparující koncovky z plastu o lékařské kvalitě zajistí, aby nedošlo k římsám, transportaci, nadměrnému rozšíření nebo změně tvaru kanálku.
- Dvourychlostní sonická energie pro vaše endodontické ošetření (18 000 a 3 000 cyklů za minutu).
- Moderní, multifunkční nabíjecí základna: nabíjecí port a další doplňkový stojan.
- Intuitivní zacházení s baterií: modus rychlého nabíjení, snadná a rychlá výměna baterie s akustickým signálem, stále/konstantně k dispozici díky záložní baterii se snadnou manipulací.
- Nástavec otočný o 360° pro skvělý a pohodlný klinický přístup a ergonomii.
- Lehký, dobře vyvážený.
- Zvukové tóny a dotykové/vibrační upozornění.
- Indikátor stavu baterie v aktivačním tlačítku.



Objednací čísla

SMARTLITE PRO ENDOACTIVATOR™ ENDODONTICKÝ AKTIVAČNÍ SYSTÉM KOMPLETNÍ SADA

644431

- Násadec
- EndoActivator™ stojan
- 2 baterie
- Dobíjecí základna
- Box na příslušenství (napájecí konektor, adaptéry AU, EU, US, UK, USB kabel)
- Uživatelský návod
- Kartačka s postupem
- SLP-EA ochranné návleky 100/balení (644434)
- EA koncovky malé 25/balení (6444435)
- EA koncovky střední 25/balení (644436)
- EA koncovky střední dlouhé 25/balení (644437)

SMARTLITE PRO ENDOACTIVATOR™ ENDODONTICKÝ AKTIVAČNÍ SYSTÉM DOPLŇKOVÁ SADA

644432

- EndoActivator™ stojan
- Uživatelský návod
- Kartačka s postupem
- SLP-EA ochranné návleky 100/balení (644434)
- EA koncovky malé 25/balení (6444435)
- EA koncovky střední 25/balení (644436)
- EA koncovky střední dlouhé 25/balení (644437)

644434 SmartLite Pro EndoActivator™
100 ochranných návleků

644435 SmartLite Pro EndoActivator™
25 koncovek malých (15/02)
22 mm

644436 SmartLite Pro EndoActivator™
25 koncovek středních (25/04)
22 mm

644437 SmartLite Pro EndoActivator™
25 koncovek dlouhých (25/4)
28 mm

644438 SmartLite Pro EndoActivator™ stojan



Dentsply Sirona

1301 Smile Way | York, PA 17404 USA
www.dentsplysirona.com

©2022 Dentsply Sirona. All rights reserved.

**Dentsply
Sirona**

SYM / T EN ENAC BRC 001 / 01/ 2022—updated 08/2022
ML440028B (8-17-2022)